



JUST THE PATIENT

www.abloc.eu

Tel : + 33(0) 2 41 17 49 49

Fax: + 33(0) 2 72 22 11 43

info@abloc.eu

8 rue des Frères Montgolfier

49240 Avrillé

France

Notice d'utilisation de la gouttière de Quenu **réf. QUENU01/ QUENU01T / QUENU11D / QUENU11G** **QUENU03 / QUENU04 / QUENU04D / QUENU04G / QUENU06 /**

Version V6 Février 2025

UTILISATION, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La gouttière de Quenu est fabriquée en polycarbonate, issus de tests nous ayant permis de trouver la meilleure compatibilité physiologique pour maximiser la solidité du produit, qui est sensible du fait de son utilisation et de sa forme. Elle permet de protéger le bras du patient lors des gestes techniques (sur table d'opérations et/ou d'imagerie), notamment en empêchant sa chute ou le risque de compression.

Restrictions d'utilisation

- L'utilisateur doit s'assurer que la gouttière de Quenu est adaptée à la table d'opérations.
- Le poids du patient ne doit pas dépasser 250kg
- Cet accessoire s'adresse à des utilisateurs formés aux positionnements des patients et aux risques d'escarres.
- Ne pas laver la structure de la gouttière de Quenu ni son coussin en cabine de lavage et désinfection.
- Ne jamais utiliser de produit nettoyant abrasif ni éponges à grattoir.
- Ne pas fixer de bandes collantes sur le coussin ni sur le support
- L'effet mémoire de forme de nos produits est optimisé pour réduire les compressions. Bien que s'adaptant à la morphologie des patients, ils n'assurent pas leur calage tel qu'un matelas coquille à décompression. Au contraire la rétraction aux points de pressions pourrait occasionner un glissement progressif. Seuls des appuis fixés à la table peuvent assurer un maintien efficace lors des inclinaisons prononcées.
- Ne pas ajouter de sur-matelas en gel qui nuisent à la prise de forme et la bonne répartition des pressions car la surface en contact avec le patient n'est plus étirable. Seules les zones très en creux peuvent être soutenues par adjonction de coussinets lors d'interventions très longues et/ou chez les patients à risque (diabète, chimiothérapie, grand âge...), comme par exemple sous le tendon d'Achille pour réduire la pression sous le talon.
- Si un produit à base d'alcool pour la désinfection de la peau du patient est utilisé, il est impératif pour des raisons de sécurité (risque d'inflammation et/ou de macération), de veiller à ce qu'il ne s'accumule pas sous le patient.
- La structure de l'accessoire ne doit pas être mis en contact avec l'alcool pour éviter tout vieillissement prématuré.
- L'utilisation prolongée d'un alcool ou d'un dissolvant peut nuire à la conductivité et à l'élasticité du revêtement du coussin et altérer son imperméabilité et/ou provoquer son rétrécissement.
- S'assurer que le patient n'est pas allergique au polyuréthane.

Lavage, désinfection et maintenance

- Le coussin et son support peuvent être nettoyés en essuyant avec un chiffon doux imbibé d'eau contenant un détergent neutre ou avec une solution prête à l'emploi (par ex. ANIOS Surfa'safe, ALFAKARM Septalkan, Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Spray...) ou des lingettes imbibées (par ex. ANIOS Oxy Wipes ; Wip'ANIOS Excel ; Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Tissues ...).

- D'une façon générale, les désinfectants de surface comprenant un ensemble des principes actifs tels qu'aldéhyde, composés quaternaires, dérivés de guanidine et oxygène actifs, ont prouvé leur efficacité. Mais toujours choisir ceux formulés spécifiquement pour les équipements, moins filmogènes et agressifs.

- Le nettoyage et la désinfection in situ peuvent être également effectués sur le revêtement avec de l'eau chaude à la main et un détergent neutre ou avec une solution d'hypochlorite de sodium (0,1% ou de 1000 parties par million de chlore disponible).

- Les produits type Ercesolvant®, Remove®, antiadhésif GILBERT®... utilisés pour éliminer les résidus d'adhésifs (Elastoplast®, champs collants) ne doivent pas être utilisés sur le support en polycarbonate. Sur le coussin ils doivent être soigneusement rincés et séchés immédiatement après usage. Ne pas le faire peut entraîner l'accumulation de réactif endommageant le revêtement en polyuréthane. Tous produits à base d'acétone, éther et autres solvants volatiles doivent être utilisés avec les mêmes précautions.

- Il est essentiel que les articles sèchent soigneusement après nettoyage.

- Il est fortement recommandé de nettoyer la surface du coussin entre deux patients, mais aussi le support plusieurs fois par jour et systématiquement après une intervention septique.

- La partie crochet des Velcro® collée sur l'accessoire doit être régulièrement débarrassée des peluches et autres fibres par un brossage. Les crochets ne doivent pas être détériorés. Il est nécessaire de vérifier qu'ils assurent une bonne fixation du coussin. Nous conseillons son renouvellement annuel, par du personnel qualifié, au moment de la maintenance, et le remplacement du coussin s'il n'adhère plus aux crochets neufs.

- Enfin, il est impératif pour des raisons d'hygiène de remplacer le coussin dès lors qu'il présente des dommages (déchirure, entaille, fissures, brûlure...) En effet, les produits altérés ne sont plus étanches et l'humidité qui pénètre alors dans la mousse y favorise le développement de germes et bactéries.

Précautions particulières

Avant toute utilisation il est nécessaire de s'assurer du bon état de la fixation du coussin et de sa bonne mise en place.


Le revêtement extérieur du coussin n'est pas destiné à un contact permanent avec la peau du patient.

L'utilisation de ce coussin ne saurait se substituer à la surveillance nécessaire à la prévention des escarres. La prévention des escarres nécessite d'identifier les facteurs de risque et de planifier des changements de position toutes les 2 à 3 heures, voire à une fréquence plus élevée.

- Ne pas faire tomber la gouttière sur le sol.
- Avant chaque utilisation il convient de s'assurer que la structure polycarbonate de la gouttière ne présente aucune trace de dégradation (craquelure, casse dans les angles...). Toute dégradation du polycarbonate nécessite son remplacement.
- Durant l'utilisation les membres de l'équipe chirurgicale ne doivent pas s'appuyer sur la gouttière.
- L'angle d'inclinaison latérale de la table d'opération ne doit pas dépasser 30°.

Mise en place de la Gouttière de Quenu :

Une fois le patient positionné sur la table d'opérations, on insère la gouttière de Quenu entre la table d'opérations et son coussin

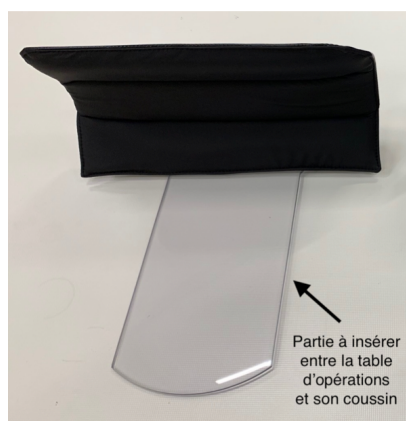

Conditions particulières de stockage et d'utilisation

Température min	Stockage : -15°	Utilisation : + 15 °
Température max	Stockage : + 45 °	Utilisation : + 25 °
Hygrométrie (%HR) min	Stockage : 30 %	Utilisation : 30 %
Hygrométrie (%HR) max	Stockage : 70 %	Utilisation : 70 %

Pièces de rechange

VSA26V : Velours
 VSA26C : Crochets
 VSA26 : Ensemble crochets + velours

QUENU01	Support polycarbonate à languette standard
QUENU01T	Support polycarbonate à languette étroite pour table Trumpf à plots
QUENU01C	Coussin
QUENU11D	Support polycarbonate à languette excentré à droite
QUENU11G	Support polycarbonate à languette excentré à gauche
QUENU03	Support polycarbonate à angle droit avec retour en angle vers l'extérieur
QUENU04	Support polycarbonate à languette standard pour coussins d'ancienne génération
QUENU04D	Support polycarbonate à languette standard pour coussins d'ancienne génération excentré à droite
QUENU04G	Support polycarbonate à languette standard pour coussins d'ancienne génération excentré à gauche
QUENU06	Support polycarbonate à angle droit

Fin de vie

En fin de vie le coussin doit être nettoyé et désinfecté normalement puis placé dans le système destiné à l'élimination des déchets de type tout venant.

Références normatives

Fabricant : @bloc

Conforme à la réglementation européenne

Dispositif Médical CE classe1

Pour le coussin et suivant le tissu utilisé : Inflammabilité BS7175 1989 - EN 1021/part 1 et 2 - M1 (NFP 92503) ++ Antistatique BS2050 1978 - ISO 2878.

Tout incident grave survenu en lien avec l'un de nos coussins devra faire l'objet d'une notification auprès de @bloc et de l'ANSM conformément à la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter.

