


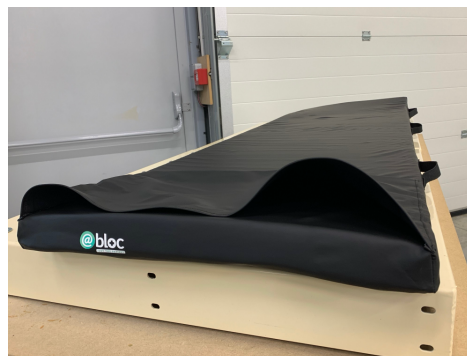

Notice d'utilisation du matelas BRAN002ARM @bloc pour brancard MEDEVAC

Version V4 Février 2025

Le matelas pour brancard MEDEVAC BRAN002ARM intègre des mousses, issus de tests nous ayant permis de trouver la meilleure compatibilité physiologique pour maximiser le confort et la sécurité du patient, en réduisant considérablement le risque d'escarres. Ils sont destinés à être positionnés sur les brancards MEDEVAC® pour optimiser le confort des patients.

Restrictions d'utilisation

- L'utilisateur doit s'assurer que le matelas est adapté au brancard.
- Ce matelas s'adresse à des utilisateurs formés aux positionnements des patients et aux risques d'escarres.
- Ne pas laver nos coussins et matelas en cabine de lavage et désinfection.
- Ne jamais utiliser de produit nettoyant abrasif ni éponges à grattoir.
- Ne pas fixer de bandes collantes sur le matelas mais si nécessaire sur les côtés du brancard en veillant toujours à intercaler un champ pour éviter le contact de l'adhésif sur le matelas ou coussin.
- Si un produit à base d'alcool pour la désinfection de la peau du patient est utilisé, il est impératif pour des raisons de sécurité (risque d'inflammation et/ou de macération), de veiller à ce qu'il ne s'accumule pas sous le patient.
- L'utilisation prolongée d'un alcool ou d'un dissolvant peut nuire à la conductivité et à l'élasticité du revêtement du matelas ou du coussin et altérer son imperméabilité et/ou provoquer son rétrécissement.
- S'assurer que le patient n'est pas allergique au polyuréthane.

Caractéristiques

- Le matelas est constitué de mousse haute densité (40kg/m³) et de mousse viscoélastique (85Kg/m³)
- Composition de l'enveloppe externe supérieure : Polyuréthane (tissu en polyamide enduit polyuréthane)
- Composition de l'enveloppe externe inférieure : PVC (support coton enduit PVC)
- Procédé d'assemblage par coutures traditionnelles
- Le matelas est équipé d'une poche permettant la mise en place d'un coussin pour la tête
- Le matelas est équipé de 3 poignées de chaque côté permettant le passage des sangles de maintien. Ces poignées peuvent également être utilisées pour le transport du matelas
- Une sangle est fournie afin de maintenir le matelas en position roulée lors de son transport
- Un sac imperméable de transport est proposé en option (référence BRANSAC02)

Dimensions :

- Longueur 1900 mm, largeur 560 mm et épaisseur 50 mm

Roulage du matelas

Pour faciliter son transport le matelas peut être roulé. Pour cela :

- Procéder au roulage au sol tout en comprimant le matelas.
- Ceinturer le matelas avec la sangle fournie

Pour le déroulage :

Procéder en sens inverse.



JUST THE PATIENT

www.abloc.eu

Tel : + 33(0) 2 41 17 49 49


Fax: + 33(0) 2 72 22 11 43

info@abloc.eu

8 rue des Frères Montgolfier

49240 Avrillé

France

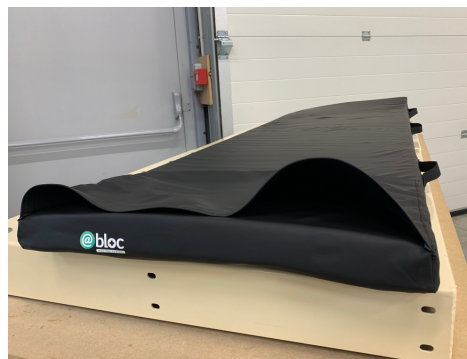

Lavage, désinfection et maintenance

• Les matelas ou coussins peuvent être nettoyés en essuyant avec un chiffon doux imbibé d'eau contenant un détergent neutre ou avec une solution prête à l'emploi (par ex. ANIOS Surfa'safe, ALFAKARM Septalkan, Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Spray...) ou des lingettes imbibées (par ex. ANIOS Oxy Wipes ; Wip'ANIOS Excel ; Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Tissues ...).

• D'une façon générale, les désinfectants de surface comprenant un ensemble des principes actifs tels qu'aldéhyde, composés quaternaires, dérivés de guanidine et oxygène actifs, ont prouvé leur efficacité. Mais toujours choisir ceux formulés spécifiquement pour les équipements, moins filmogènes et agressifs.

• Le nettoyage et la désinfection in situ peuvent être également effectués sur le revêtement avec de l'eau chaude à la main et un détergent neutre ou avec une solution d'hypochlorite de sodium (0,1% ou de 1000 parties par million de chlore disponible).

• Les produits type Ercesolvant®, Remove®, antiadhésif GILBERT®... utilisés pour éliminer les résidus d'adhésifs (Elastoplast®, champs collants), doivent être soigneusement rincés et séchés immédiatement après usage. Ne pas le faire peut entraîner l'accumulation de réactif endommageant le revêtement en polyuréthane. Tous produits à base d'acétone, éther et autres solvants volatiles doivent être utilisés avec les mêmes précautions.

• Il est essentiel que les articles sèchent soigneusement après nettoyage. Ainsi il ne faut jamais recouvrir nos matelas avec des champs, gels, sur-matelas chauffant, ni les reposer sur le brancard avant leur complet séchage.

• Enfin, il est impératif pour des raisons d'hygiène de remplacer le matelas ou le coussin dès lors qu'il présente des dommages (déchirure, entaille, fissures, brûlure...).

Précautions particulières

Avant toute utilisation il est nécessaire de s'assurer du bon état de la fixation du matelas et de sa bonne mise en place.

Le revêtement extérieur du matelas n'est pas destiné à un contact permanent avec la peau du patient.

Le matelas peut être roulé et sangle pour faciliter son transport. Pour un stockage prolongé il est préférable de mettre le matelas à l'horizontal.

L'utilisation de ce matelas ne saurait se substituer à la surveillance nécessaire à la prévention des escarres. La prévention des escarres nécessite d'identifier les facteurs de risque et de planifier des changements de position toutes les 2 à 3 heures, voire à une fréquence plus élevée.

Conditions particulières de stockage et d'utilisation

Température min	Stockage : -15°	Utilisation : -15 °
Température max	Stockage : + 45 °	Utilisation : + 45 °
Hygrométrie (%HR) min	Stockage : 30 %	Utilisation : 30 %
Hygrométrie (%HR) max	Stockage : 70 %	Utilisation : 70 %


Fin de vie

En fin de vie le matelas doit être nettoyé et désinfecté normalement puis placé dans le système destiné à l'élimination des déchets de type tout venant.



Tel : + 33(0) 2 41 17 49 49
Fax : + 33(0) 2 72 22 11 43
info@abloc.eu

8 rue des Frères Montgolfier
49240 Avrillé
France

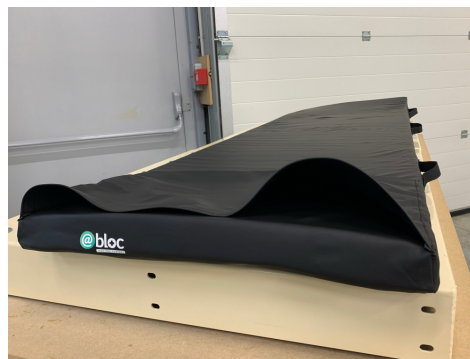

Références normatives

Fabricant : @bloc
Conforme à la réglementation européenne
Dispositif Médical CE classe1
Inflammabilité
BS7175 1989 crib5 pour le tissu supérieur
M1 pour le tissu inférieur
Tissu en contact avec le patient : Antistatique suivant ISO 2878

Tout incident grave survenu en lien avec l'un de nos matelas devra faire l'objet d'une notification auprès de @bloc et de l'ANSM conformément à la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter.

